

# **DIASpot Neptune ANA<sup>8</sup>IgG**

***KAPDTANA8N***





# History

---

## Summary of change :

Previous Version :	Current Version :
150402/1	200224/1
Multilanguage IFU	Addition of the following sentence at the end of the English IFU: "Other translations of this Instructions for Use can be downloaded from our website: <a href="https://www.diasource-diagnostics.com/">https://www.diasource-diagnostics.com/</a> "
Old Diasource logo	New Diasource logo
No IVD symbol	IVD symbol added
<b>LOT</b> : 150402/1	Version: 200224/1
PI number : 1701296	No PI number
No manufacturer symbol	Manufacturer symbol added



# DIASpot Neptune ANA<sup>8</sup> IgG

en

## KAPDTANA8N

PROTOCOL : 02

### IN VITRO DIAGNOSTIC

DIASource ImmunoAssays SA - Rue du Bosquet 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium - Tel: +32 10 84 99 11 - Fax : +32 10 84 99 90

#### 1. INTENDED USE

DIASpot Neptune ANA<sup>8</sup> IgG is an Immunodot kit intended for the detection in human sera of IgG autoantibodies against Sm, Sm/RNP, SSA/Ro60kD, SSB (La), Jo-1 (histidyl-t-RNA synthetase), Scl-70 (DNA topoisomerase I), PM-Scl 100 and CENP-A/B (centromere A/B proteins) antigens.

More information on the source/type of antigens is available via technical support department at [tech.support@diasource.be](mailto:tech.support@diasource.be)

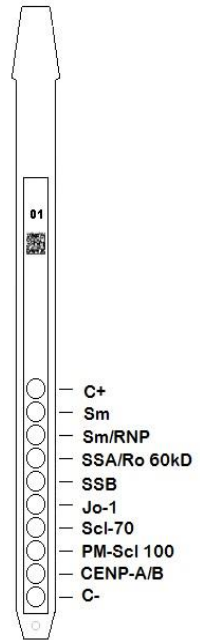
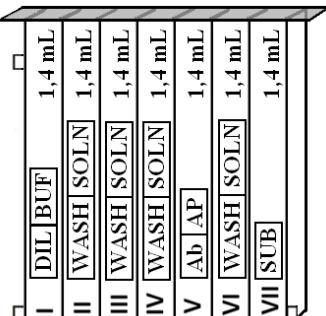
#### 2. PRINCIPLE OF THE TEST

This kit is intended to be performed on the *Neptune Instrument*. The test is based on the principle of an Enzyme Immunoassay. The test strips are composed of a membrane fixed on a specific plastic support. During the automated test procedure, the Neptune instrument sequentially incubates the strips in the wells of ready-to-use reagent cartridges. Briefly: the strips are first incubated with diluted patients' sera. Human antibodies, if present, bind to the corresponding specific antigen(s) on the membrane. Unbound or excess antibodies are removed by washing. Upon further incubation into AP-conjugated goat antibodies against human IgG, the enzyme conjugate binds to the antigen-antibody complexes. After removal of excess conjugate by washing, the strips are finally incubated into a substrate solution. Enzyme activity, if present, leads to the development of purple dots on the membrane pads. The intensity of the coloration is directly proportional to the amount of antibody present in the sample.

#### 3. KIT CONTENTS

Abbreviations in alphabetic order:

AP = Alkaline Phosphatase; BCIP = Bromo-Chloro-Indolyl-Phosphate; KCl = Potassium Chloride; MgCl<sub>2</sub> = Magnesium Chloride; MIT = MethylthioThiazolone; NaCl = Sodium Chloride; NaN<sub>3</sub>: Sodium Azide; NBT = NitroBlue Tetrazolium; TBS = Tris Buffer Saline

<p>STRIP</p>	<p><b>Dot strips</b> 3 x 8 units on plastic supports breakable individually; sealed</p> <p><b>10 Dots on each:</b> 1 positive control (C+) 8 antigens 1 negative control (C-)</p>	<p><b>STRIP</b></p> 	<p><b>CARTRIDGE</b></p> 
<p>CART</p>	<p><b>Cartridge</b> 24 units having each 7 compartments; sealed</p>		
<p>DIL    BUF</p> <p>WASH   SOLN</p> <p>Ab    AP</p>	<p><b>Diluent buffer</b> I<sup>st</sup> position, 1 x 1,4 ml (yellow) <i>contains:</i> H<sub>2</sub>O • TBS • NaCl • Tween • Preservative (MIT) • Dye • Antifoam emulsion</p> <p><b>Wash buffer</b> II<sup>nd</sup>, III<sup>rd</sup>, IV<sup>th</sup> and VI<sup>th</sup> position, 4 x 1,4 ml (colourless) <i>contains:</i> H<sub>2</sub>O • TBS • NaCl • Tween • Preservative (MIT) • Antifoam emulsion</p> <p><b>Conjugate</b> V<sup>th</sup> position, 1 x 1,4 ml (red) <i>contains:</i> H<sub>2</sub>O • TBS • NaCl • KCl • MgCl<sub>2</sub> • AP-conjugated goat anti-human IgG • Stabilizer • Preservative (MIT) • Dye • Antifoam emulsion</p>		
<p>SUB</p>	<p><b>Substrate</b> VII<sup>th</sup> position, 1 x 1,4 ml (pale yellow solution) <i>contains:</i> H<sub>2</sub>O • NaN<sub>3</sub>(0.05 %) • MgCl<sub>2</sub> • TBS • NBT • BCIP • Stabilizer • Antifoam emulsion</p>		
<p><b>Other material</b></p>	<p>Absorbent paper (for drying of tips pt 8.1.16), sealed Together with Dot strips</p>		

#### 4. MATERIAL REQUIRED BUT NOT PROVIDED

Neptune Instrument, Micropipettes / Laboratory gloves

## 5. STORAGE AND STABILITY

The test kit must be stored at a temperature between +2°C to +8°C. Do not freeze.

After initial opening of the kit, unused reagent cartridges must be stored at 2-8°C protected from (sun)light preferably inside the original kit box

Unused strips have to be placed back into the provided pouches, sealed and stored at 2-8°C preferably *inside* the original kit box.

When stored properly, all test kit components are stable until the indicated expiry date.

## 6. SAFETY PRECAUTIONS

All reagents are for in vitro diagnostic and professional use only. The test kit should be processed by trained technical staff only.

The kit contains potentially hazardous components, thus contact with skin, eyes or mucosae has to be avoided.

Patient samples shall be handled with care as being a potential infection hazard.

Waste disposal: Patient samples and incubated test strips should be handled as infectious waste. Other reagents do not need to be collected separately, unless stated otherwise in official regulations.

DIAsource ImmunoAssays S.A. and its authorized distributors shall not be liable for damages indirectly or consequentially brought about by changing or modifying the procedure indicated.

In any case, GLP should be applied with all general and individual regulations to the use of this kit.

## 7. SAMPLE COLLECTION, HANDLING AND STORAGE

Blood samples can be collected in dry tubes or in tubes containing EDTA, heparin or citrate. After separation serum or plasma samples can generally be stored at 2-8°C for up to three days. Long term storage requires freezing at -20°C. Avoid repeated freezing/thawing cycles. After freezing always agitate samples before use to ensure homogeneity.

## 8. ASSAY PROCEDURE

### **BASIC INFORMATION, HANDLING AND TIPS:**

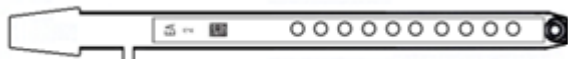
#### **TEST PROCESS principle:**

After manual loading of the strips and reagent cartridges, the incubation and washing steps of the procedure are automatically processed by the Neptune instrument which ensures an efficient circulation of fluids over the strips by continuously agitating them up and down in the wells of ready-to-use reagent cartridges. The whole test procedure is run at room temperature.

#### **STRIPS description:**

**The reactive (front) side** of the strips is coated with antigens which appear as faint blue dots. This coloration ensures that all antigens have been correctly spotted onto the membrane. The coloration disappears during the processing of the test. This front side also displays a strip number and a 2-dimensional square barcode for traceability of the strips after removal from the Neptune instrument at the end of the test.

**The non-reactive (back) side** of the strips displays both alphanumeric and bar-coded information for identification of the strip type and lot number by the Neptune instrument.



The strips must be manually inserted into the dedicated clamp before starting the automated process (see Test Preparation hereafter, pt 9.1.4). During this operation, avoid touching the membrane zone of the strips with fingers. Always wear laboratory gloves and use the plastic parts (strip support) for handling or manipulation.

#### **REAGENT CARTRIDGES description: (see image on page 1)**

The reagent cartridges are composed of 7 different wells filled with ready-to-use reagents. The cartridges are sealed and the reagent wells are hermetically separated. The sealing has to be removed before starting the test. Once opened, manipulate the cartridges with care in order to avoid reagent spilling and contamination from well to well.

The rear (back) side of the cartridges is labelled with both alphanumeric and bar-coded information for identification of the cartridge type and lot number by the Neptune instrument.

The cartridges must be manually loaded onto the dedicated cartridge holder before starting the automated process (see Test Preparation hereafter, pt 8.1.10). The front and rear (back) sides of the cartridges have, respectively, a bottom triangular and two (bottom + top) square plastic edges for secure position and orientation into the holder.

#### **STRIPS/CARTRIDGES associations**

The strips and cartridges of a same test kit share the same lot number and are dedicated to be associated in lot-specific pairs. Do not associate, in a same pair, a strip and a cartridge with different lot numbers as this will be detected as an invalid setting by the Neptune instrument and will stop the process.

As far as each strip/cartridge pair is valid, the Neptune instrument can process strips/cartridges associations of different kits; However, only kits having the same protocol number (same incubation time and sequence) can be processed together in one same run (please refer to the protocol number indicated under the kit reference at the top of first page).

### **8.1 Test preparation**

- Allow all kit components to equilibrate at room temperature (+18°C to +25°C) before use.
- A working list (either edited from Neptune quantification software, or external) should always be prepared for easy loading and correct association of strips, cartridges and patient samples.
- Make sure that the cartridge holder is fixed in its emplacement in the Neptune instrument.
- Make sure that the Neptune Instrument is plugged in.

The following steps sequence summarizes the loading and preparation of the Neptune instrument, test strips, reagent cartridges and patient samples before starting the test. For detailed information or in case of any problem met at one of the following steps, please refer to the Manual of Use of the Neptune instrument.

1. Switch ON the Neptune instrument and wait a few seconds until the date and time are displayed on the touch screen.
2. Confirm the correct Date and Time by pressing ✓ on the touch screen (in case of first use or for reset, refer to the manual of use of the Neptune instrument) → "Initialize?" is displayed on the screen.
3. Confirm Initialization by pressing ✓ on the touch screen → the horizontal arm of the instrument automatically moves forward to a central (stand-by) position → "Load strips (24)" is displayed on the screen
4. (Do not set nor confirm the number of strips at this step). Remove the clamp from its emplacement on the arm by gently pulling it upwards and load the strips to be tested: handle the clamp with numbered side facing up (open position) and insert the strips, also with numbered (reactive)

side facing up, by slipping the upper plastic part (tongue) into the dedicated holes of the clamp. Apply a gentle pressure to ensure that the plastic tongue has reached the bottom end of the hole.

**Notes:**

- Always start loading into position 1 of the clamp (left side) and do not leave empty spaces between the strips!
  - After complete loading, check visually the vertical, horizontal and lateral alignment of the strips. Any obvious misalignment should be corrected by unloading the strip(s) from the clamp and loading them again.
  - Be Careful: any plastic bits remaining after breaking apart the individual strip holders may hinder the processing on the instrument and/or the reading with the Neptune scanner; please remove them with scissors
5. Replace the clamp in its emplacement on the arm by gently pushing it downwards
  6. Set the number of loaded strips using the up and down arrows on the touch screen.
  7. Confirm the number of loaded strips by pressing ✓ on the touch screen → the horizontal arm automatically moves backward to stand over the alignment holes of the cartridge holder → **“Check alignment”** is displayed on the screen.
  8. Use the **“JOG”** function on the screen to check the correct alignment of the strips: maintain a gentle pressure on the down arrow on the touch screen until the bottom of the strips enters into the alignment holes of the cartridge holder. If correctly aligned, the strips will not touch the outlines of the holes.  
Note: in case of misalignment (contact of the strips with the cartridge holder), please refer to the Manual of Use of the Neptune instrument).
  9. Confirm the correct alignment of the strips by pressing ✓ on the touch screen → the Neptune instrument lowers the strips completely into the alignment holes and reads the barcodes of the strips → after complete barcode reading, **“Load reagent”** is displayed on the touch screen.  
Note: in case of failure to read one or more strip(s) barcode(s) (flashing LED at the unread position), please refer to the Manual of Use of the Neptune instrument.
  10. Unseal the reagent cartridges and insert them under their respective strips in the dedicated notches of the cartridge holder.
  11. Confirm complete loading by pressing ✓ on the touch screen → the Neptune instrument reads the cartridges barcodes and checks the correct association with the strips → after complete barcode reading, the number of strips (validated strips/cartridges associations) is displayed on the screen.  
Note: in case of failure to read one or more cartridge(s) barcode(s), or in case of detection of a wrong strip/cartridge association (flashing LED at the corresponding position), please refer to the Manual of Use of the Neptune instrument.
  12. Confirm the number of strips by pressing ✓ on the touch screen → the protocol number identified on the barcodes is displayed on the screen (**Protocol ID xx.**)
  13. Confirm the protocol number by pressing ✓ on the touch screen → **“Please close cover.”** is displayed on the screen.
  14. Close the cover of the Neptune instrument and confirm closing by pressing ✓ on the touch screen → the Neptune instrument proceeds to a first washing (pre-treatment) step by incubating the strips into the 2<sup>nd</sup> well of the cartridges (processing time: 1 minute) → At the end of the wetting step, **“Please open cover.”** is displayed on the screen.
  15. Open the cover of the Neptune instrument and confirm opening by pressing ✓ on the touch screen → the horizontal arm automatically moves forward to the front of the instrument and swings the strips to an oblique position → **“Dry strips”** is displayed on the screen.
  16. Dry the strips by gently applying absorbent paper onto the basis of the bottom small cavity (sample loading hole).
  17. Confirm drying by pressing ✓ on the touch screen → **“Apply samples”** is displayed on the screen.
  18. Apply samples by pipeting 10 µl of patient serum/plasma into the bottom sample loading holes of the strips.  
Note: If preferred the 10 µl of the serum can be directly pipetted into the Diluent Buffer (“Well 1”) of the cartridge. This operation can be done at any time from opening of the cartridges (see point 8.1.10)
  19. Confirm samples’ loading by pressing ✓ on the touch screen → **“Please close cover”** is displayed on the screen.
  20. Close the cover of the Neptune instrument and confirm closing by pressing ✓ on the touch screen → the Neptune starts the test automatically by proceeding the following steps sequence (**Protocol 02**):

**8.2 Test processing**

Step	Description	Processing time
01.	The strips are incubated into the 1 <sup>st</sup> well of the cartridge ( <i>Diluent Buffer</i> ). Upon contact with the liquid in the wells and agitation, the pre-loaded patients’ samples (see 9.1.18) are released from the small cavity at the bottom of the strips and are diluted in the buffer.	30 min
02.	The clamp moves forwards and the strips are incubated into the 2 <sup>nd</sup> well of the cartridge ( <i>Wash Buffer</i> )	2 min
03.	The clamp moves forwards and the strips are incubated into the 3 <sup>rd</sup> well of the cartridge ( <i>Wash Buffer</i> )	2 min
04.	The clamp moves forwards and the strips are incubated into the 6 <sup>th</sup> well of the cartridge ( <i>Wash Buffer</i> )	2 min
05.	The clamp moves backwards and the strips are incubated into the 5 <sup>th</sup> well of the cartridge ( <i>Conjugate</i> )	10 min
06.	The clamp moves backwards and the strips are incubated into the 4 <sup>th</sup> well of the cartridge ( <i>Wash Buffer</i> )	2 min
07.	The clamp moves backwards and the strips are incubated into the 3 <sup>rd</sup> well of the cartridge ( <i>Wash Buffer</i> )	2 min
08.	The clamp moves backwards and the strips are incubated into the 2 <sup>nd</sup> well of the cartridge ( <i>Wash Buffer</i> )	2 min
09.	The clamp moves forwards and the strips are incubated into the 7 <sup>th</sup> well of the cartridge ( <i>Substrate</i> )	10 min
10.	The clamp moves backwards and the strips are incubated into the 6 <sup>th</sup> well of the cartridge ( <i>Wash Buffer</i> )	2 min

After completion of the process, the clamp moves to a central (stand-by) position in the Neptune Instrument to allow easy manipulation of the clamp. The instrument beeps and **“Finished test”** is displayed on the screen.

Gently apply absorbent paper onto the basis of the strips to remove liquid from the bottom small cavity (sample loading hole) and allow the strips to dry for 30 minutes before interpretation of the results. The interpretation has to be done in the 24 hours following the test processing.

*In case of use of the Neptune Scanner for help of results interpretation, please leave the processed strips attached to the clamp.*

**TEST DATA REGISTRATION**

The test protocol can be downloaded by pressing the USB stick symbol and following the indications on the screen (Insert USB → Writing USB → Remove USB). This step is not obligatory but is highly recommended for traceability and regulatory matters

**9. RESULTS INTERPRETATION**

A visual evaluation of the results can be performed, however the use of the Neptune quantification software and scanner system is generally recommended for more precise and semi-quantitative interpretation.

More information on Neptune quantification software is available via your distributor or via our website [www.diasource.be](http://www.diasource.be)

## 9.1 Visual interpretation:

1. Remove the clamp from the Neptune instrument and unload the strips from the clamp.
2. Place the strips with reactive face up onto the marked fields of the Neptune Interpretation Template provided with the kit. This will indicate the respective positions of the different controls and antigens on the membrane.
3. The first upper Dot (Positive control) must be positive for all patients.  
*Only a clearly coloured positive Control Dot ensures your results are valid and operation was correct and/or kit components were not degraded. If the first upper Dot is not coloured, the test has failed and cannot be interpreted further.*
4. Compare the specific antigen Dots to the Negative Control Dot (which always is the last bottom dot).  
The colour intensity of the Antigen Dots is directly proportional to the titer of the specific antibody in the patient sample.  
*The colour intensity of the Negative Control dot may vary depending on the sample characteristics. If the sample is free of interfering substances the Negative Control dot may be even close to uncoloured. In contrast, a highly coloured Negative Control dot indicates a high rate of unspecific binding in the sample.*

### POSITIVE RESULT:

A sample is positive for a specific antibody if the colour intensity of the corresponding Antigen Dot is higher than the intensity of the Negative Control Dot.

### NEGATIVE RESULT:

A sample is negative for a specific antibody if the colour intensity of corresponding Antigen Dot is lower than or equal to the intensity of the Negative Control Dot.

NB: A weak coloration of an antigen dot, when close to the colour intensity of the Negative Control Dot may be difficult to differentiate by visual inspection only. In such cases, it is recommended to use Neptune quantification software and scanner system (see 9.2) and refer to the corresponding instructions for more accurate interpretation.

Neptune quantification software arbitrary unit (AU)	Interpretation
< 5	Negative
5 - 10	Equivocal (*)
>10	Positive

\* Low titers of auto-antibodies may occur in healthy patients. For this reason low positive results (between 5 to 10 AU), although valid, should be considered equivocal. Retesting of the patient, preferably by using a new sample, is therefore recommended. If the result is still equivocal on retesting, then other diagnostic tests and/or clinical information should be used to help determine the autoimmune status of the patient.

## 9.2 Use of Neptune quantification software and scanning system

1. Remove the clamp from the Neptune instrument. Leave the processed strips attached to the clamp.
2. Insert the clamp, the reactive side of the strips facing down, into the dedicated emplacement in the cover of the Neptune scanner.
3. Start scanning the strips using the Neptune quantification software.  
For detailed information about the Neptune scanner and Neptune quantification software please refer to the Manual of Use of your Neptune quantification software.

## 10. TEST PERFORMANCES

### 10.1 Reproducibility

Reference control samples were tested for each antibody in statistically relevant repetitions in a same run or over several runs for the calculation of intra- and inter-assay variation, respectively. In every case the intensity of the Dots were within the specified range and standard deviations were less than 10 %

*Detailed analytical data are available upon request.*

### 10.2 Sensitivity and Specificity

<b>Sm</b>		<b>Sm/RNP</b>		<b>SSA/Ro60kD</b>		<b>SSB</b>		
	+	-		+	-		+	-
+	true positive 36	false positive 2	+	true positive 24	false positive 0	+	true positive 54	false positive 1
-	false negative 0	true negative 100	-	false negative 0	true negative 30	-	false negative 0	true negative 93
	Sensitivity 100%	Specificity 98%		Sensitivity 100%	Specificity 100%		Sensitivity 100%	Specificity 99%
<b>Jo-1</b>		<b>Sci-70</b>		<b>PM-Sci 100</b>		<b>CENP-A/B</b>		
	+	-		+	-		+	-
+	true positive 22	false positive 0	+	true positive 13	false positive 0	+	true positive 16	false positive 1
-	false negative 0	true negative 119	-	false negative 0	true negative 91	-	false negative 0	true negative 97
	Sensitivity 100%	Specificity 100%		Sensitivity 100%	Specificity 100%		Sensitivity 100%	Specificity 99%

Characterized samples (confirmed positive or negative for specific antibodies by reference methodologies) were assayed following the test instructions. Reaction intensities were evaluated using the Neptune quantification software. Sensitivity and Specificity were calculated from ROC analysis at the cut-off values automatically measured by the Neptune quantification software.

## 11. TEST LIMITATIONS

1. A clinical diagnosis should not be made on the basis of a single in vitro diagnostic method only.
2. A complete clinical investigation, as well as other laboratory test results, should be considered to state a diagnosis, since no technique used alone can rule out the possibility of false-positive or false-negative results. In this respect, more particularly an indirect Immunofluorescence test, when applicable, should be performed in parallel with the determination of autoantibodies by DIASpot Neptune, as Immunofluorescence is often considered as a gold reference screening technique in autoimmunity.
3. Diasource Immunoassay s.a. and its authorised distributors **shall not be liable for any damages resulting from a change or modification in the procedure indicated**. The kit should be performed by trained technical staff only.
4. In any case, GLP should be applied with all general and individual regulations to the use of this kit.
5. Diasource Immunoassay's liability shall in any event be limited to the replacement of the kit.

Other translations of this Instructions for Use can be downloaded from our website: <https://www.diasource-diagnostics.com/>

Revision date : 2020-02-24





# DIASpot Neptune ANA<sup>8</sup> IgG



## KAPDTANA8N

PROTOCOL : 02

### IN VITRO DIAGNOSTIC

DIAsource ImmunoAssays SA - Rue du Bosquet 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium - Tel: +32 10 84 99 11 - Fax : +32 10 84 99 90

#### 1. USO

DiaSpot Neptune ANA<sup>8</sup> IgG es un kit de inmunodot destinado a la detección de antígenos en suero humano de anticuerpos IgG contra Sm, Sm / RNP, SSA/Ro60kD, SSB (La), Jo-1 (histidil-t-RNA sintetasa), Scl-70 (ADN topoisomerasa I), PM-Scl 100 y CENP-A / B (A / B centrómero proteínas).

Más información sobre la fuente/tipo de antígenos utilizados está disponible a través de su distribuidor o a través nuestro Departamento de soporte técnico : [tech.support@diasource.be](mailto:tech.support@diasource.be).

#### 2. PRINCIPIO DEL ENSAYO

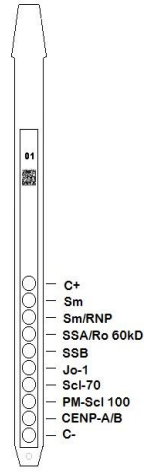
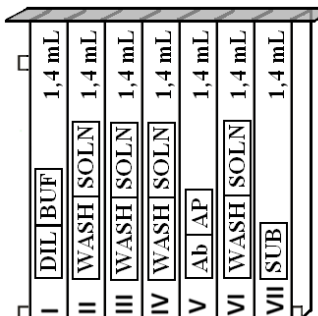
Este kit esta diseñado para utilizarlo en el instrumento *Neptune*. Este test esta basado en el principio del Enzimoimmunoensayo. Las tiras del ensayo se componen de una membrana fijada a un soporte específico de plástico. Durante el procedimiento del ensayo automatizado el instrumento Neptune secuencialmente incubaba las tiras en los pocillos de los cartuchos con los reactivos listos para su uso. Brevemente: Las tiras son incubadas primero con sueros de pacientes diluidos. Los anticuerpos humanos, si están presentes, se enlazan a los antígenos específicos correspondientes en la membrana. Los anticuerpos no enlazados o en exceso se eliminan mediante lavado. Después de una incubación adicional en anticuerpos de cabra conjugados con AP contra IgG humana el conjugado enzimático se une a los complejos antígeno-anticuerpos. Después de eliminar el exceso de conjugado, por lavado, las tiras son incubadas finalmente en solución de sustrato. La actividad enzimática, si está presente, desarrolla unos puntos de color púrpura en los pocillos de la membrana. La intensidad de la coloración es directamente proporcional a la cantidad de anticuerpo presente en la muestra.

#### 3. CONTENIDO DEL KIT

Abreviaciones en orden alfanumérico:

AP = Fosfatasa Alcalina; BCIP = Fosfato de Bromo-Cloro-Indolil-Phosphate; KCl = Cloruro de potasio; MgCl<sub>2</sub> = Cloruro de Magnesio;

MIT = MetilIsoTiazolona; NaCl = Cloruro Sódico; NaN<sub>3</sub>: Azida sódica; NBT = Nitroazul Tetrazolio; TBS = Tris Buffer Salino

<table border="1"> <tr><td>STRIP</td></tr> </table>	STRIP	3 x 8 unidades en soporte plástico Separables individualmente; sellados  10 Dots en cada: 1 control positivo (C+) 8 antígenos 1 control negativo (C-)	<b>TIRA</b>  	<b>CARTUCHO</b>  					
STRIP									
<table border="1"> <tr><td>CART</td></tr> <tr><td>DIL</td><td>BUF</td></tr> <tr><td>WASH</td><td>SOLN</td></tr> <tr><td>Ab</td><td>AP</td></tr> <tr><td>SUB</td></tr> </table>	CART	DIL	BUF	WASH	SOLN	Ab	AP	SUB	24 unidades con 7 compartimientos; sellados  1ª position, 1 x 1,4 ml (Amarillo) <i>contiene: H<sub>2</sub>O • TBS • NaCl • Tween • Conservante (MIT) • Dye • Antiespumante de emulsión</i> 2ª, 3ª, 4ª y 6ª posición, 4 x 1,4 ml (incoloro) <i>contiene: H<sub>2</sub>O • TBS • NaCl • Tween • Conservante (MIT) • Antiespumante de emulsión</i> 5ª posición, 1 x 1,4 ml (rojo) <i>contiene: H<sub>2</sub>O • TBS • NaCl • KCl • MgCl<sub>2</sub> • AP-conjugado anti-humano de cabra IgG • Estabilizante • Conservante (MIT) • Dye • Antiespumante de emulsión</i> 7ª posición, 1 x 1,4 ml (solución Amarillo pálido) <i>contiene: H<sub>2</sub>O • NaN<sub>3</sub> (0.05 %) • MgCl<sub>2</sub> • TBS • NBT • BCIP • Estabilizante • Antiespumante de emulsión</i>
CART									
DIL	BUF								
WASH	SOLN								
Ab	AP								
SUB									
<b>Otros materiales</b>	Papel absorbente (para secar las tiras pt 9.1.16), junto con las tiras de sellado Dot								

#### 4. MATERIAL OLIGATORIO O NECESARIO PERO NO SUMINISTRADO

Instrumento Neptune, Micropipetas / Guantes de Laboratorio

#### 5. ALMACENAJE Y ESTABILIDAD

El kit debe ser almacenado a una temperatura entre +2°C y +8°C. No congelar.

Después de abrir el kit los cartuchos no utilizados deben de almacenarse a 2-8°C protegidos de la luz, preferiblemente dentro de la caja original.

Las tiras no utilizadas deben de guardarse en las bolsas suministradas selladas y almacenarlas a 2-8°C preferiblemente dentro de la caja original.

Cuando se almacena adecuadamente, todos los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada.

#### 6. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todos los reactivos son para uso en diagnostico in vitro y profesional. El equipo de prueba debe ser procesado solo por personal técnico cualificado.

El kit contiene componentes potencialmente peligrosos, por lo tanto debe de evitarse el contacto con piel, ojos y mucosas.

Los componentes de sangre humana utilizados en este kit han sido testados por métodos aprobados por la CEE y/o la FDA dando negativo a HBsAg, anti-HCV, anti-HIV-1 y 2. No se conoce ningún método que asegure que los derivados de la sangre humana no transmitan hepatitis, SIDA ó otras infecciones. Por lo tanto el manejo de los reactivos y muestras se hará de acuerdo con los procedimientos de seguridad locales.

Las muestras de paciente deben de ser manejadas con cuidado por existir un peligro potencial de infección.

Eliminación de residuos: Las muestras de pacientes y las tiras utilizadas deben de tratarse como desechos infecciosos. Otros reactivos no deben de recogerse por separado a no ser que lo indiquen los reglamentos oficiales.

DIAsource ImmunoAssays S.A. y sus Distribuidores autorizados no se hacen responsables de los daños indirectamente provocados por el cambio o modificación del procedimiento.

En cualquier caso, el GLP se debe aplicar todas las normas generales y particulares para el uso de éste kit.

## 7. RECOGIDA DE MUESTRAS, MANEJO Y ALMACENAJE

Las muestras de sangre pueden recogerse en tubos secos o tubos con EDTA, heparina o citrato. Después de la separación las muestras de suero o plasma se pueden guardar a 2-8°C durante tres días. Para periodos más largos deben ser congeladas a -20°C. Evitar congelar y descongelar varias veces. Después de descongelar agitar las muestras antes de ser utilizadas para asegurar su homogeneidad.

## 8. PROCEDIMIENTO

### **INFORMACIÓN BÁSICA, MANEJO Y CONSEJOS:**

#### **Principio del ensayo:**

Después de la carga manual de las tiras y los cartuchos de reactivos, la incubación y los pasos de lavado se procesan automáticamente por el instrumento Neptune el cual asegura la circulación eficiente de los fluidos sobre las tiras por un agitación de arriba hacia abajo en los pocillos de los cartuchos de reactivo. El procedimiento se realiza a temperatura ambiente.

#### **TIRAS descripción:**

**Parte reactiva (parte frontal)** los antígenos recubren las tiras las cuales presentan unos puntos azulados débiles. Esta coloración asegura que los antígenos han sido impregnados en la membrana. La coloración desaparece durante el procedimiento. La parte frontal también muestra el número de la tira y el código de barras 2-dimensional cuadrado para la rastreabilidad de las tiras después de retirar las tiras del instrumento Neptune al final del ensayo.

**Parte no-reactiva (reverso)** de las tiras muestra información alfanumérica y código de barras para la identificación del tipo de tira y número de lote por parte del instrumento Neptune.



Las tiras deben de ser insertadas manualmente en la abrazadera antes de iniciarse (ver preparación de la prueba pt 8.1.4). Durante esta operación no toque la zona de la membrana de las tiras con los dedos. Utilizar siempre guantes y utilizar las partes de plástico (soporte de la tira) para el manejo o manipulación.

#### **CARTUCHOS DE REACTIVO descripción: (ver imagen en página 1)**

Los cartuchos de reactivo se componen de 7 diferentes pocillos rellenos de reactivos listos para su uso. Los cartuchos van sellados (todos los pocillos están herméticamente separados) y se puede retirar antes de iniciar el test. Una vez abiertos, manejar los cartuchos con cuidado con el fin de evitar el derrame y la contaminación de pocillo a pocillo.

La parte posterior de los cartuchos están etiquetadas con información alfanumérica y un código de barras para la identificación del tipo de cartucho y número de lote por parte del instrumento Neptune.

Los cartuchos pueden ser cargado manualmente en la posición asignada para cartuchos antes de iniciar el proceso automatizado (ver la preparación del test, pt 8.1.10). La parte frontal y posterior de los cartuchos tienen, respectivamente, un fondo triangular y dos (inferior y superior) cuadrados de plástico para asegurar la posición y orientación dentro de su soporte.

#### **TIRAS/CARTUCHOS asociaciones**

Las tiras y cartuchos del mismo kit comparten el mismo número de lote y se dedican a ser utilizados en pares de los mismos números de lotes asociados. En caso de no asociación, una tira y un cartucho de diferente número de lote es detectado por el instrumento Neptune como inválido y se para el proceso.

En el momento en cada pareja de tira/cartucho es válida, el instrumento Neptune puede procesar diferentes kits a la vez; sin embargo solo se pueden procesar a la vez kits que tengan el mismo número de protocolo (incubación y secuencia de ensayo) (observar el número de protocolo indicado debajo de la referencia del kit en la primera página de las instrucciones de uso).

#### **8.1 Preparación del ensayo**

- Conseguir que todos los componentes del kit estén a temperatura ambiente (+18°C a 25°C) antes de ser utilizados.
- La lista de trabajo (obtenida desde el software para cuantificación Neptune o externa) debería de prepararse con el fin de facilitar la carga correcta de las tiras y los cartuchos asociadas a sus muestras.
- Asegurarse que el cartucho se coloca correctamente en su posición del instrumento Neptune
- Asegurarse que el instrumento Neptune está conectado

Los siguientes pasos resumen la secuencia de los pasos de carga y preparación del instrumento Neptune, tiras de test, cartuchos de reactivos y muestras de paciente antes de iniciar el test. Para información más detallada o en caso de cualquier problema e uno de los siguientes pasos consultar el Manual de Usuario del instrumento Neptune.

1. Conectar el instrumento *Neptune Instrument* y esperar unos segundos hasta que la fecha y la hora aparezcan en la pantalla táctil.
2. Confirmar la fecha y hora correctas presionando ✓ en la pantalla táctil (la primera vez o para resetear, consultar el Manual de Usuario del *Neptune Instrument*) → "Inicializar?" aparece en la pantalla.
3. Confirmar inicialización presionando ✓ en la pantalla táctil → el brazo horizontal se mueve hacia la posición central automáticamente (posición de reposo) → "Cargar tiras (24)" aparece en la pantalla
4. (No confirmar el número de tiras en éste paso). Retire la abrazadera del brazo tirando hacia arriba y cargue las tiras que se van a utilizar: manejar la pinza con la cara numerada hacia arriba (posición abierta) y cargar las tiras, también con la numeración (reactivo) hacia arriba, por deslizamiento de la parte superior de plástico (lengua) en los orificios de la abrazadera. Presionar suavemente para asegurar que la lengüeta de plástico ha alcanzado el extremo inferior del agujero

#### **Notas:**

- Colocar las tiras a partir de la posición 1 de la abrazadera (parte izquierda) y no dejar espacios entre las tiras!
  - Después de cargar las tiras comprobar el alineamiento vertical, horizontal y lateral de las tiras. Cualquier mal alineamiento debe de ser corregido antes de colocar la abrazadera en el brazo.
  - Tenga precaución: cualquier parte de plástico, remanente después de romper los soportes individuales de las tiras, puede dificultar el proceso en el instrumento y/o en la lectura en el sistema de escaneo, remuévalos con unas tijeras
5. Vuelva a colocar la abrazadera en su emplazamiento presionando suavemente hacia abajo.
  6. Indicar el número de tiras cargadas utilizando la flecha hacia arriba o hacia abajo en la pantalla táctil
  7. Confirmar el número de tiras cargadas presionando ✓ en la pantalla táctil → El brazo horizontal se mueve automáticamente y se posiciona sobre los orificios de alineación de los cartuchos → "Chequear alineamiento" aparece en la pantalla.
  8. Utilice la función "Paso a paso" para comprobar la perfecta alineación de las tiras: presionar suavemente la flecha hacia abajo hasta que las tiras entren en el orificio de los cartuchos. Si el alineamiento es correcto las tiras no deben de tocar las paredes de los orificios.
- Nota:** en caso de mal alineamiento (roce de las tiras con el orificio del cartucho), remitirse al Manual de Usuario del instrumento Neptune.

9. Confirmar el alineamiento correcto de las tiras presionando ✓ en la pantalla táctil → El instrumento *Neptune Instrument* introduce las tiras en los orificios de alineamiento y lee los códigos de barras de las tiras → después de leer los códigos de barras, aparece "Cargar reactivos" en la pantalla táctil.  
*Nota:* en caso de fallo en la lectura de una o más tiras (una LED intermitente marcará la posición no leída), remitirse al Manual de Usuario del instrumento *Neptune Instrument*.
10. Desprecintar los cartuchos de reactivo e insertarlos con el código de barras hacia dentro en las respectivas muescas destinadas a soportar los cartuchos.
11. Confirmar la carga presionando ✓ en la pantalla táctil → El instrumento *Neptune Instrument* lee los códigos de barras de los cartuchos y chequea la correcta asociación con las tiras → después de la lectura de los códigos de barras el número de tiras aparece en pantalla (tiras validadas/cartuchos asociados).  
*Nota:* en caso de fallo en la lectura de uno o más cartuchos o detección errónea de asociación tira/cartucho (la LED correspondiente parpadeara) remitirse al Manual de Usuario del Instrumento *Neptune Instrument*.
12. Confirmar el número de tiras presionando ✓ en la pantalla táctil → el número de protocolo identificado en el código de barras aparece en la pantalla (**ID Protocolo: xx**).
13. Confirmar el número de protocolo presionando ✓ en la pantalla táctil → "Por favor, cerrar la tapa" aparece en la pantalla.
14. Cerrar la tapa del instrumento *Neptune Instrument* y confirmar que se ha cerrado presionando ✓ en la pantalla táctil → El instrumento procede a efectuar el primer lavado (pre-tratamiento) incubando las tiras en el 2º pocillo de los cartuchos (1 minuto) → al final del paso de hidratación, "Por favor, abrir la tapa" aparece en la pantalla.
15. Abrir la tapa del instrumento *Neptune Instrument* y confirmar presionando ✓ en la pantalla táctil → el brazo horizontal se mueve automáticamente hacia el frente del instrumento y colocando las tiras de forma oblicua → "Secar tiras" aparece en la pantalla.
16. Secar las tiras con un papel absorbente suavemente en la parte inferior de las tiras (orificio donde se dispensa la muestra).
17. Confirmar el secado presionando ✓ en la pantalla táctil → "Aplicar muestras" aparece en la pantalla.
18. Dispensar las muestras pipeteando 10 µl de suero/plasma de paciente en el orificio inferior de las tiras.  
*Nota:* Si prefiere, pueden dispensarse los 10µl del suero directamente en el Buffer de dilución ("Celda 1") del cartucho. Esta operación puede ser realizada en cualquier momento abriendo el cartucho correspondiente (ver Punto 08.1.10).
19. Confirmar la carga de las muestras presionando ✓ en la pantalla táctil → "Por favor, cerrar la tapa" aparece en pantalla.
20. Cerrar la tapa del instrumento *Neptune Instrument* y confirmar que se ha cerrado presionando ✓ en la pantalla táctil → El *Neptune Instrument* empezará automáticamente el proceso según la secuencia de pasos (**Protocolo 02**)

## 8.2 Procedimiento

Paso	Descripción	Tiempo empleado
01.	Las tiras son incubadas en el 1º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de dilución</i> ). Al entrar en contacto con el líquido de los y la agitación, las muestras de los pacientes pocillos (ver 9.1.18) se liberan de la parte inferior de la tira y se diluyen en el tampón.	30 min
02.	El brazo se mueve hacia adelante y las tiras son incubadas en el 2º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de lavado</i> )	2 min
03.	El brazo se mueve hacia adelante y las tiras son incubadas en el 3º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de lavado</i> )	2 min
04.	El brazo se mueve hacia adelante y las tiras son incubadas en el 6º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de lavado</i> )	2 min
05.	El brazo se mueve hacia atrás y las tiras son incubadas en el 5º pocillo del cartucho ( <i>Conjugado</i> )	10 min
06.	El brazo se mueve hacia atrás y las tiras son incubadas en el 4º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de lavado</i> )	2 min
07.	El brazo se mueve hacia atrás y las tiras son incubadas en el 3º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de lavado</i> )	2 min
08.	El brazo se mueve hacia atrás y las tiras son incubadas en el 2º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de lavado</i> )	2 min
09.	El brazo se mueve hacia adelante y las tiras son incubadas en el 7º pocillo del cartucho ( <i>Sustrato</i> )	10 min
10.	El brazo se mueve hacia atrás y las tiras son incubadas en el 6º pocillo del cartucho ( <i>Tampón de lavado</i> )	2 min

Después de completado el proceso, el brazo se mueve hasta la posición central (reposo) del instrumento Neptune para permitir el fácil manejo de la pinza. El instrumento emite un pitido y "Test finalizado" aparece en pantalla.

Aplicar suavemente papel absorbente en la parte inferior de las tiras (cavidad donde se a dispensado la muestra) y dejar secar las tiras durante 30 minutos antes de interpretar los resultados. La lectura de interpretación debe ser realizado dentro de las 24 horas de procesado del test.

*En caso de utilizar el Neptune escáner para ayudar en la interpretación de resultados, dejar las tiras procesadas en la pinza.*

### REGISTRO DE DATOS

El protocolo del test se puede descargar pulsando el símbolo de una memoria USB y siguiendo las indicaciones de la pantalla (Insertar USB → Escribir USB → Retirar USB). Este paso no es obligatorio pero recomendable para la trazabilidad asuntos regulatorios.

## 9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Se puede realizar la interpretación visual de resultados, sin embargo el uso del software para cuantificación Neptune y del escáner se recomienda para una mejor y precisa interpretación semi-cuantitativa.

Más información sobre software para cuantificación Neptune está disponible a través del distribuidor local o a través nuestro Departamento de soporte técnico : tech.support@diasource.be.

### 9.1 Interpretación visual:

1. Quitar la pinza del instrumento Neptune y extraer las tiras de la pinza.
2. Poner las tiras con la parte de reactivo hacia arriba sobre los campos marcados en la plantilla de interpretación incluida en el kit. Esto indicará las respectivas posiciones de los diferentes controles y antígenos de la membrana.
3. El primer Dot (Control Positivo) debe ser positivo para todos los pacientes.

*Solo una coloración claramente positiva del Control Dot asegura que los resultados son válidos y le funcionamiento del ensayo ha sido correcto y/o los reactivos no sean degradado. Si el punto superior no se ha coloreado, el ensayo ha fallado y no se pueden interpretar los resultados.*

4. Comparar los Dots de los antígenos específicos con el Dot del Control Negativo (que siempre ocupa la posición inferior del dot). La intensidad del color de los Dots de los antígenos es directamente proporcional al título del anticuerpo específico en la muestra del paciente.

*La intensidad del color del Control Negativo puede varias en función de las características de la muestra. Si la muestra no contiene sustancias que interfieran al Control Negativo, el dot puede ser incluso incoloro. Por otro lado, una coloración alta del Control Negativo indica un alto enlace no específico en la muestra.*

### RESULTADO POSITIVO:

Una muestra es positiva para un anticuerpo específico si la intensidad del color del Dot del antígeno correspondiente es más alta que la intensidad del Dot del Control Negativo.

### RESULTADO NEGATIVO:

Una muestra es negativa para un anticuerpo específico si la intensidad del color del Dot del antígeno correspondiente es más baja o igual que la intensidad del Dot del Control Negativo.

NB: Una coloración débil de un punto, cuando cerca de la intensidad de color del punto de control negativo puede ser difícil de diferenciar mediante simple inspección ocular. En tales casos, se recomienda utilizar el software Neptune y sistema de exploración (ver 9.2) y consultar las instrucciones correspondientes para una interpretación más precisa.

## 9.2 Uso del Software y sistema de escaneo

1. Retirar la pinza del instrumento Neptune. Dejar las tiras procesadas unidas a la pinza.
  2. Introducir la pinza, la parte reactiva de las tiras hacia abajo, en la ranura de la tapa del Neptune escáner.
  3. Iniciar el escaneo de las tiras utilizando el software para cuantificación Neptune.
- Para información detallada sobre el Neptune escáner y Software para cuantificación Neptune consulte el Manual de Usuario y el software para cuantificación Neptune.

Neptune software resultados unidades arbitrarias (UA)	Interpretación
< 5	Negativo
5 - 10	Dudoso o Equívoco (*)
>10	Positivo

\* Bajos niveles y títulos de auto-anticuerpos en pacientes sanos pueden ocurrir o mostrarse. Por esa razón, resultados positivos débiles (resultados comprendidos entre los 5 a 10 UA a pesar de poder ser válidos, deben considerarse equívocos o dudosos. Es recomendable repetir el test de estos pacientes usando nuevas muestras de los mismos. Si los resultados siguen siendo equívocos o dudosos, entonces otro método y/o información clínica deben ser usados para ayudar en la determinación del estado de autoinmunidad de los pacientes

## 10. CARACTERÍSTICAS DEL TEST

### 10.1 Reproducibilidad

Las muestras de control de Referencia fueron testadas para cada anticuerpo en repeticiones estadísticamente relevantes en el mismo ensayo o en varios ensayos para el cálculo de la variación intra e inter ensayo respectivamente. En todos los casos la intensidad de los Dots estaban dentro del intervalo y las desviaciones estándar fueron inferiores al 10%.

Los datos analíticos están disponibles previa petición.

### 10.2 Sensibilidad y Especificidad

Muestras caracterizadas y presentadas (positivos o negativos confirmados para antígenos específicos por laboratorios y/o metodologías de referencia) fueron procesados siguiendo las instrucciones del test. Sensibilidad y Especificidad fueron calculados de los resultados generados por Neptune software.

Sm	Sm/RNP	SSA/Ro60kD	SSB																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>36</td><td>2</td><td>69</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>0</td><td>100</td><td>1</td><td>78</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 100% Specificity 98%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	36	2	69	0	false negative	true negative	false negative	true negative	0	100	1	78	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>24</td><td>0</td><td>69</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>0</td><td>30</td><td>1</td><td>78</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 100% Specificity 100%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	24	0	69	0	false negative	true negative	false negative	true negative	0	30	1	78	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>69</td><td>0</td><td>69</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>1</td><td>78</td><td>1</td><td>78</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 99% Specificity 100%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	69	0	69	0	false negative	true negative	false negative	true negative	1	78	1	78	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>54</td><td>1</td><td>69</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>0</td><td>93</td><td>1</td><td>78</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 100% Specificity 99%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	54	1	69	0	false negative	true negative	false negative	true negative	0	93	1	78
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
36	2	69	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
0	100	1	78																																																																																
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
24	0	69	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
0	30	1	78																																																																																
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
69	0	69	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
1	78	1	78																																																																																
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
54	1	69	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
0	93	1	78																																																																																
Jo-1	Scl-70	PM-Scl 100	CENP-A/B																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>22</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>0</td><td>119</td><td>0</td><td>24</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 100% Specificity 100%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	22	0	10	0	false negative	true negative	false negative	true negative	0	119	0	24	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>13</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>0</td><td>91</td><td>0</td><td>24</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 100% Specificity 100%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	13	0	10	0	false negative	true negative	false negative	true negative	0	91	0	24	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>0</td><td>24</td><td>0</td><td>24</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 100% Specificity 100%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	10	0	10	0	false negative	true negative	false negative	true negative	0	24	0	24	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">+</th><th colspan="2">-</th></tr><tr><th>true positive</th><th>false positive</th><th>true positive</th><th>false positive</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>1</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><th>false negative</th><th>true negative</th><th>false negative</th><th>true negative</th></tr><tr><td>0</td><td>97</td><td>0</td><td>24</td></tr></tbody></table> <p>Sensitivity 100% Specificity 99%</p>	+		-		true positive	false positive	true positive	false positive	16	1	10	0	false negative	true negative	false negative	true negative	0	97	0	24
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
22	0	10	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
0	119	0	24																																																																																
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
13	0	10	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
0	91	0	24																																																																																
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
10	0	10	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
0	24	0	24																																																																																
+		-																																																																																	
true positive	false positive	true positive	false positive																																																																																
16	1	10	0																																																																																
false negative	true negative	false negative	true negative																																																																																
0	97	0	24																																																																																

## 11. LIMITACIONES DEL TEST

1. El Diagnóstico clínico no debe realizarse en base a un solo método de diagnóstico in vitro.
2. Una investigación clínica completa, así como otros resultados de test de laboratorio, deberían de considerarse como estado del diagnóstico, ya que ninguna técnica por sí sola puede descartar la posibilidad de resultados falsos positivos o falsos negativos. En este sentido, más concretamente, una prueba de inmunofluorescencia indirecta, en su caso, se debe de realizar en paralelo con la determinación de auto anticuerpos por DIASpot Neptune, ya que la inmunofluorescencia es considerada el método de referencia y de rastreo en autoinmunidad.
3. Diasource ImmunoAssay s.a. y sus distribuidores autorizados, no son responsables, por daños algunos generados como resultado de cambios o modificaciones en el procedimiento indicado. El kit debe ser usado solamente por personal técnico debidamente entrenado.
4. En cualquier caso, las BPL (GLP) que regulan todos los procedimientos, deben ser aplicadas en todo caso particular o general en que se use este kit.
5. La responsabilidad de la empresa Diasource ImmunoAssay's (o sus distribuidores autorizados) está limitada en cualquier caso únicamente hasta el reemplazo del kit en cuestión.

Última revisión : 2020-02-24